

NÁVOD K POUŽITÍ

GUTTA PERCHA POINTS

Ručně balené endodontické čepy

Používají se k vyplnění připraveného zubního kanálku před obnovou zubu.

Složení

Gutaperča, Oxid zinečnatý, Oxid zirkoničitý, Síran barnatý, Barvicí prostředek

Použití

1. Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený, zda neobsahuje nečistoty a zda je jeho tvar vhodný k použití.
2. Zkontrolujte, zda výrobek nemá prošlou dobu použitelnosti.
3. Po ošetření zubního kanálku poškozeného zubu použijte k jeho vyplnění gutaperču správné velikosti.
4. Tento přípravek je jednorázový a po použití je třeba jej zlikvidovat.

Předpokládané využití

1. Předpokládané využití: Používá se k vyplnění připraveného zubního kanálku před obnovou zubu.
2. Indikace: Používá se k vyplnění připraveného zubního kanálku před obnovou zubu.
3. Kontraindikace: Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou na tento produkt alergičtí.
4. Skupina pacientů: Všechny věkové skupiny
5. Zamýšlený uživatel: zubní lékaři
6. Vedlejší účinky/nežádoucí účinky: Nebyly hlášeny žádné vedlejší ani nežádoucí účinky.
7. Potenciální riziko při opětovném použití: Opakované použití použitého guttaperčového hrotu může způsobit zánět.
8. Může být použit se sealerem nebo cementem a musí být použit pod dohledem zubního lékaře podle klinické diagnózy.
9. Jednorázová pomůcka

Preventivní opatření

1. Nepoužívejte jinak než u zubního lékaře.
2. Nepoužívejte, pokud je výrobek prošlý.
3. Před použitím zkontrolujte, zda uvnitř zubního kanálku není infekce.
4. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou na tento přípravek alergičtí.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunečního záření.

Likvidace

Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy dané země.

Doba použitelnosti 4 roky ode dne výroby

Radioprůhledné Ekvivalent 6mm hliníkové stupňovité hrany

Symbols



Datum použitelnosti



Kód šarže



Katalogové číslo



Unikátní identifikátor zařízení



Nepoužívejte opakovaně



Nesterilní



Zdravotnický prostředek



Přečtěte si návod k použití




Výrobce



Uchovávejte mimo dosah slunečního světla



Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství

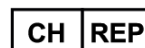

Zplnomocněný zástupce v Švýcarsku

SURE DENT CORPORATION (Výrobce)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korejská republika

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE

Evropa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgie
Švýcarsko - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Švýcarsko

- V případě, že v souvislosti s prostředkem dojde k závažné události, nahlaste ji výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.
- SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) lze stáhnout na <http://www.suredent.com>.
- Označení velikosti a délky : Ohledně označení velikosti a délky se obraťte na výrobce.

Rev. A 2023/03/01



EDGE ENDO®