

GEBRUIKSAANWIJZING

GUTTA PERCHA POINTS

Handgerolde endodontische punten

Gebruikt om een geprepareerd wortelkanaal te vullen voorafgaand aan de tandrestauratie.

Samenstelling

Gutta percha, Zinkoxide, Zirkoniumoxide, Bariumsulfaat, Kleurstof

Toepassing

1. Controleer of het product beschadigd is, of er onzuiverheden in zitten en of de vorm geschikt is voor gebruik.
2. Controleer of het product binnen de houdbaarheidsdatum is.
3. Gebruik na de behandeling van het wortelkanaal van de beschadigde tand gutta percha van de juiste grootte om te vullen.
4. Dit product is voor eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegooid.

Beoogd doel

1. Beoogd gebruik: Wordt gebruikt voor het vullen van een geprepareerd wortelkanaal voorafgaand aan tandrestauratie.
2. Indicatie: Gebruikt om een geprepareerd wortelkanaal te vullen voorafgaand aan tandrestauratie.
3. Contra-indicatie: Niet gebruiken bij patiënten die allergisch zijn voor dit product.
4. Patiëntenpopulatie: Alle leeftijdsgroepen
5. Beoogde gebruiker: Tandarts
6. Bijwerkingen Er zijn geen bijwerkingen of nadelige effecten gerapporteerd.
7. Potentieel risico bij hergebruik: Hergebruik van gebruikte Gutta percha punt kan ontsteking veroorzaken.
8. Kan gebruikt worden met sealer of cement en moet gebruikt worden onder toezicht van de tandarts volgens de klinische indicatie.
9. Apparaat voor eenmalig gebruik

Voorzorgsmaatregel

1. Niet gebruiken door iemand anders dan een tandarts-specialist.
2. Niet gebruiken als het product verlopen is.
3. Controleer voor gebruik op infectie in het wortelkanaal.
4. Niet gebruiken bij patiënten die allergisch zijn voor dit product.

Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur uit de buurt van direct zonlicht.


Verwijdering

Verwijderen van de inhoud/verpakking volgens de voorschriften van het land.

Houdbaarheid 4 jaar vanaf de productiedatum

Radiopaak Gelijkwaardig aan 6 mm aluminium stootrand

Symbolen

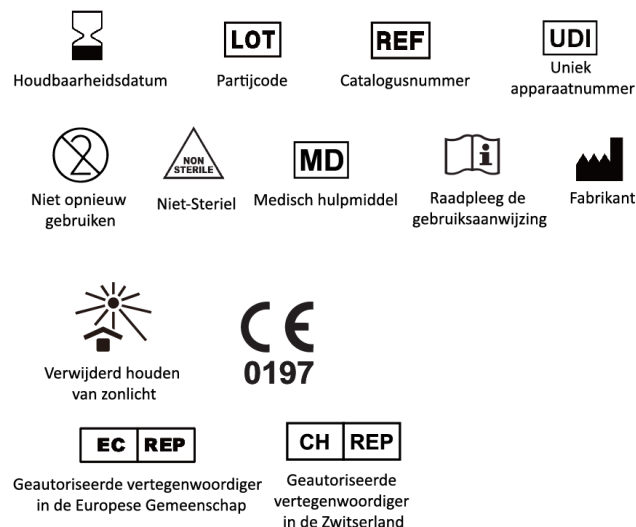

SURE DENT CORPORATION (Fabrikant)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER

Europa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, België

Zwitserland - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Zwitserland

- In geval van een ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel, gelieve dit te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
- De SSCP (Samenvatting van veiligheid en klinische prestaties) kan worden gedownload op <http://www.suredent.com>.
- Maataanduiding en lengte Neem contact op met de fabrikant voor de maataanduiding en lengte.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®