

ISTRUZIONI PER L'USO

GUTTA PERCHA POINTS

Punti endodontiche arrotolate a mano

Utilizzati per riempire otturazioni prima della ricostruzione del dente.

Composizione

Gutta Percha, Ossido di zinco, Ossido di zirconio, Solfato di bario, Agenti colorante

Utilizzo

1. Controllare l'integrità del prodotto, l'eventuale presenza di impurità e idoneità della forma per l'uso.
2. Controllare la data di scadenza del prodotto.
3. Dopo il trattamento dell'otturazione del dente danneggiato, utilizzare un gutta percha di dimensioni adeguate al riempimento.
4. Questo prodotto può essere gettato dopo l'uso.

Destinazione

1. Uso di destinazione: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
2. Istruzioni: utilizzato per riempire un'otturazione prima della ricostruzione del dente.
3. Controindicazioni: Non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.
4. Tipologia pazienti: Tutte l'età
5. Utilizzatore previsto: Dentista
6. Effetti collaterali/Effetti avversi: Non ci sono effetti collaterali o effetti avversi segnalati.
7. Potenziale rischio se riutilizzato: Il riutilizzo di un Gutta Percha point già usato potrebbe causare infiammazione.
8. Può essere utilizzato con un sigillante o cemento. Utilizzare sotto il controllo del dentista, secondo le indicazioni cliniche.
9. Dispositivo monouso

Precauzioni

1. Utilizzare solo da professionisti dentali.
2. Non utilizzare se il prodotto è scaduto.
3. Prima dell'uso, assicurarsi che non siano presenti infezioni all'interno dell'otturazione.
4. Non utilizzare su pazienti allergici a questo prodotto.

Conservazione


Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di luce diretta

Smaltimento : Gettare il contenuto/la scatola secondo i regolamenti del proprio paese.

Durata : 4 anni dalla data di produzione

Radiopaco: Equivalente a uno spessore di 6 mm di alluminio

Simboli

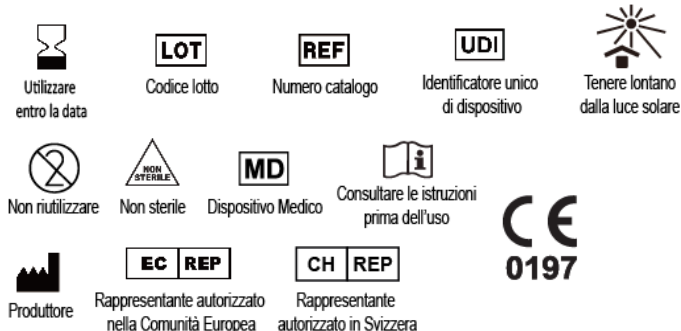

SURE DENT CORPORATION (Produttore)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

Rappresentante Autorizzato

Europe - OBELIS S.A. - Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Switzerland - Obelis GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

- In caso di gravi incidenti relativi al dispositivo, inviare una segnalazione al produttore e alle autorità competenti nello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente si trovano.
- Il SSCP (Riassunto della sicurezza e della prestazione clinica) può essere scaricato dal sito <http://www.suredent.com>.
- Designazione della taglia e lunghezza : Vi preghiamo di contattarci per la designazione della taglia e la lunghezza.