

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

GUTTA PERCHA POINTS

Ćwieki gutaperkowe ręcznie rolowane do stomatologii

Służą do wypełnienia przygotowanego kanału korzeniowego przed odbudową zęba.

Skład

Gutaperka, tlenek cynku, tlenek cyrkonu, siarczan baru, barwnik

Zastosowanie

1. Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń, obecności zanieczyszczeń oraz czy jego kształt jest odpowiedni do zastosowania.
2. Sprawdź datę ważności produktu.
3. Po oczyszczeniu kanału uszkodzonego zęba, do jego wypełnienia użyj gutaperki w odpowiednim rozmiarze.
4. Produkt jest jednorazowego użytku i powinien być zutylizowany po użyciu.

Zamierzone przeznaczenie

1. Zamierzone zastosowanie: do wypełnienia przygotowanego kanału korzeniowego przed odbudową zęba.
2. Wskazania: do wypełnienia przygotowanego kanału korzeniowego przed odbudową zęba.
3. Przeciwwskazania: nie stosować u pacjentów uczulonych na którykolwiek składnik produktu.
4. Wiek pacjentów: wszystkie grupy wiekowe.
5. Zamierzony użytkownik: lekarz dentysta.
6. Skutki uboczne/działania niepożądane: nie zgłoszono skutków ubocznych ani działań niepożądanych.
7. Potencjalne ryzyko związane z ponownym użyciem: ponowne użycie używanego ćwieka z gutaperki może prowadzić do zapalenia tkanek.
8. Może być stosowany z uszczelniaczem lub cementem, powinien być stosowany pod kontrolą dentysty zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
9. Wyrób jednorazowego użytku.

Środki ostrożności

1. Do użytku wyłącznie przez lekarza dentystę.
2. Nie używać po dacie przydatności do użytkowania.
3. Przed użyciem należy upewnić się, że w kanale zębowym nie rozwinęła się infekcja.
4. Nie należy używać u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Utylizacja

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.


Okres przydatności

4 lata od daty produkcji

Nieprzepuszczające promieniowania rentgenowskiego

Odpowiednik aluminiowego klina szarości 6 mm

Symbole

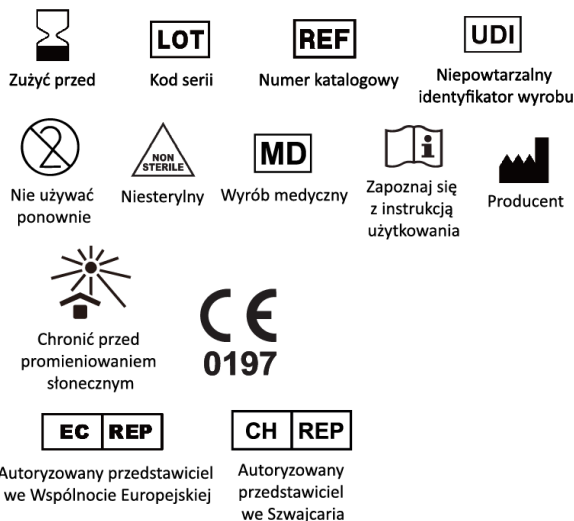

SURE DENT CORPORATION (Producent)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Europa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium
Szwajcaria - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego zdarzenia związanego z wyrobem należy zgłosić je producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.
- SSCP (Podsumowanie bezpieczeństwa i wyników klinicznych) można pobrać pod adresem <http://www.suredent.com>.
- Oznaczenie rozmiaru i długość: W sprawie oznaczenia rozmiaru i długości prosimy o kontakt z producentem.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®