

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

GUTTA PERCHA POINTS

Pontas endodônticas enroladas à mão

Utilizado para preencher um canal radicular preparado antes da restauração do dente.

Composição

Guta-percha, Óxido de zinco, Óxido de zircônio, Sulfato de bário, Agente de coloração

Aplicação

1. Verifique se o produto está danificado, se há presença de impurezas e se a forma é adequada para utilização.
2. Verifique se o produto está dentro do prazo de validade.
3. Depois de tratar o canal radicular do dente danificado, utilize a gutta-percha de tamanho adequado para o preenchimento.
4. Este produto é descartável e deve ser deitado fora após a utilização.

Objetivo pretendido

1. Utilização prevista: Utilizado para preencher um canal radicular preparado antes da restauração do dente.
2. Indicação: Utilizado para preencher um canal radicular preparado antes da restauração do dente.
3. Contra-indicação: Não usar em doentes alérgicos a este produto.
4. População de doentes: Todos os grupos etários
5. Utilizador previsto: Dentista
6. Efeitos secundários/efeitos adversos: Não foram registados quaisquer efeitos secundários ou adversos.
7. Risco potencial em caso de reutilização: A reutilização da ponta de gutta-percha usada pode causar inflamação.
8. Pode ser utilizado com selante ou cimento e deve ser utilizado sob o controlo do dentista de acordo com a indicação clínica.
9. Dispositivo de utilização única

Precaução

1. Não utilize outro produto que não seja um especialista em medicina dentária.
2. Não utilize se o produto tiver expirado.
3. Antes de utilizar, verifique se existe infeção no interior do canal radicular.
4. Não utilize em doentes alérgicos a este produto.

Armazenamento

Conservar à temperatura ambiente, longe da luz solar direta.


Descarte

Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos relacionados do país.

Prazo de validade 4 anos a partir da data de fabrico

Radiopaco Equivalente a um degrau de alumínio de 6 mm

Símbolos

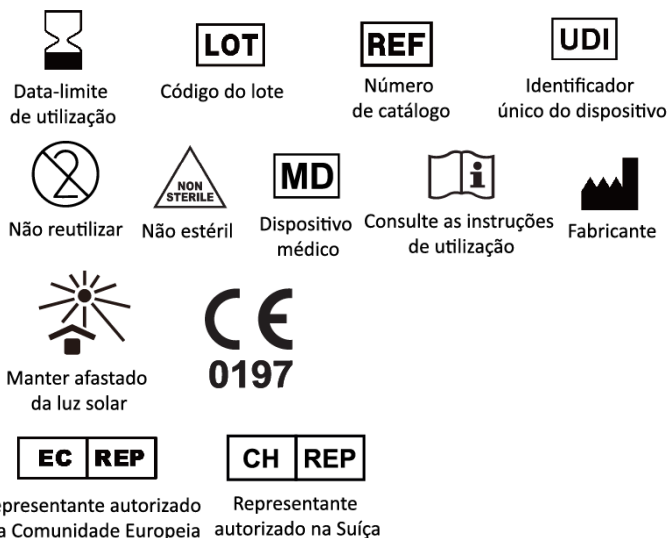

SURE DENT CORPORATION (Fabricante)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Coreia
Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Europa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Bélgica

Suíça - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Suíça

■ No caso de ocorrer algum incidente grave relacionado com o dispositivo, informe o fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

■ O SSCP (Resumo de Segurança e Desempenho Clínico) pode ser baixado em <http://www.suredent.com>.

■ Designação do tamanho e comprimento: Contacte o fabricante para obter a designação do tamanho e o comprimento.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®