

## INSTRUCCIONES DE USO

## GUTTA PERCHA POINTS

### Puntas de endodoncia enrolladas a mano

Se utilizan para rellenar un conducto radicular preparado antes de la restauración dental.

### Composición

Gutapercha, Óxido de zinc, Óxido de circonio, Sulfato de bario, Agente colorante

### Aplicación

1. Compruebe si el producto está dañado, si tiene impurezas y si la forma es adecuada para su uso.
2. Compruebe si el producto está dentro de la fecha de caducidad.
3. Después de tratar el conducto radicular del diente dañado, utilice una punta de gutapercha del tamaño adecuado para rellenar.
4. Este producto es desechable y se descarta después de su uso.

### Finalidad Prevista

1. Uso previsto: Se utiliza para rellenar un conducto radicular preparado antes de la restauración dental.
2. Indicación: Se utiliza para rellenar un conducto radicular preparado antes de la restauración dental.
3. Contraindicaciones: No utilice en pacientes alérgicos a este producto.
4. Población de pacientes: Todos los grupos de edad
5. Usuario previsto: Dentista
6. Efectos secundarios/efectos adversos: No se han reportado efectos secundarios o adversos.
7. Riesgo potencial en caso de reutilización: La reutilización de las puntas de gutapercha usadas puede causar inflamación.
8. Se puede utilizar con sellador o cemento y se utilizará bajo el control del dentista según la indicación clínica.
9. Dispositivo de un solo uso

### Precauciones

1. Sólo debe ser utilizado por especialista en odontología.
2. No utilice el producto si está caducado.
3. Antes de utilizar el producto, compruebe si hay infección en el interior del conducto radicular.
4. No utilice en pacientes alérgicos a este producto.

### Almacenamiento


Almacene el producto a temperatura ambiente lejos de la luz solar directa.

**Eliminación:** Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa del país.

**Caducidad:** 4 años a partir de la fecha de fabricación.

**Radiopaco:** Equivalente a cuña de aluminio de 6 mm

### Símbolos

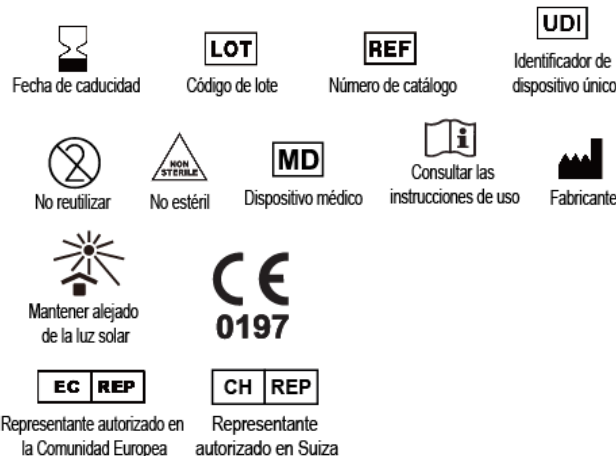

### SURE DENT CORPORATION (Fabricante)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

### Representante autorizado

**Europe - OBELIS S.A.** - Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

**Switzerland - Obelis GmbH** - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

- En caso de que se haya producido cualquier incidente grave en relación con el producto, informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- El SSCP (Resumen de seguridad y rendimiento clínico) se puede descargar en <http://www.suredent.com>.
- Designación de tamaño y longitud: Por favor contáctenos para designación de tamaño y longitud

Rev. A 2023/03/01



**EDGEENDO®**