

BRUKSANVISNING

GUTTA PERCHA POINTS

Handrullade endodontiska spetsar

Används för att fylla en förberedd rotkanal innan tandrestaurering.

Sammansättning

Guttaperka, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Bariumsulfat, Färgmedel

Kontroller

1. Kontrollera om produkten är skadad, om förekomst av föroreningar och formen är lämplig för användning.
2. Kontrollera om produkten är inom utgångsdatumet.
3. Efter att ha behandlat rotkanalen på den skadade tanden, använd guttaperka av rätt storlek för att fylla.
4. Denna produkt är för engångsbruk och kasseras efter användning.

Avsedda ändamål

1. Används för att fylla en förberedd rotkanal innan tandrestaurering.
2. Indikation: Används för att fylla en förberedd rotkanal innan tandrestaurering.
3. Kontraindikation: Använd inte för patienter som är allergiska mot innehållet i denna produkt.
4. Patientpopulation: Alla åldersgrupper
5. Avsedd användare: Tandläkare
6. Biverkningar: Inga biverkningar har rapporterats.
7. Potentiell risk vid återanvändning: Återanvändning av använd Guttaperka kan orsaka inflammation.
8. Kan användas med sealer eller cement och ska användas under kontroll av tandläkaren enligt den kliniska indikationen.
9. Engångsprodukt

Försiktighetsåtgärd

1. Används inte av annan än tandläkare.
2. Använd inte om produkten har passerat utgångsdatum.
3. Kontrollera bakteriefrihet före användning i rotkanalen.
4. Använd inte till patienter som är allergiska mot denna produkt.

Förvaring

Förvara i rumstemperatur och skydda från direkt solljus.


Hantering av restprodukter

Kassera innehållet/behållaren enligt gällande bestämmelser i landet.

Hållbarhetstid 4 år från tillverkningsdatum

Radiopak Motsvarar 6 mm aluminium stegkil

Symboler

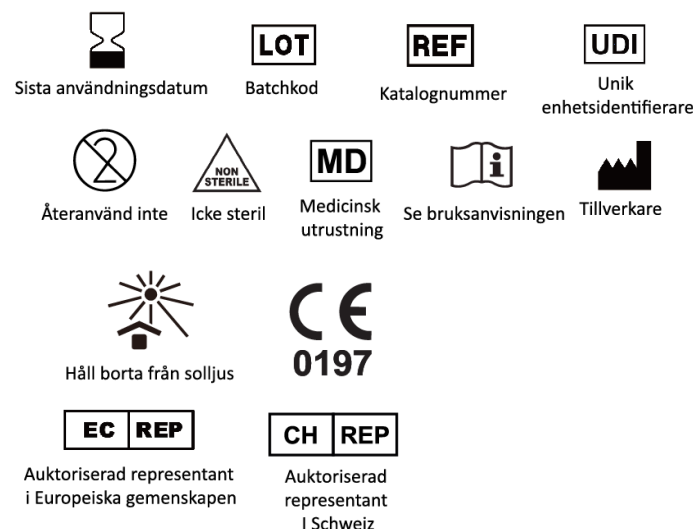

SURE DENT CORPORATION (Tillverkare)

#809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

AUKTORISERAD REPRESENTANT

Europa - OBELIS S.A Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgien

Schweiz - OBELIS GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Schweiz

- Om någon allvarlig incident har inträffat i samband med enheten, vänligen rapportera till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.
- SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) kan laddas ner på <http://www.suredent.com>.
- Storleksbeteckning och längd : Kontakta tillverkaren för storleksbeteckning och längd.

Rev. A 2023/03/01



EDGEENDO®